

Ambu



Ambu® Aura ラリソゲルマスク

シングルユースラリソゲルマスクで
より安全で効率のよい気道管理

Ambu® AuraGain™

AuraGainは、胃管アクセスと挿管機能を統合することにより、基本的な気道管理上のニーズを満たす第2世代のSGAです。

気道の解剖学的構造に合わせて事前に成形されたエアウェイチューブの柔らかく丸いカーブにより、迅速な気道確保が容易になります。

カフ部分は薄くて柔らかく、高いシール性を実現するようにデザインされています(最大40cm H₂O)。

一体型の胃管アクセスチャンネルは、摩擦の少ない内部表面加工により、胃管チューブの容易な留置が可能です。

AuraGainを介して患者さんの胃に胃管チューブを挿入することで、胃内容物の能動のおよび受動的な管理が可能となり、胃への送気を防止します。

AuraGainは、軟性気管支鏡(Ambu® aScope™ 4 ブロンコなど)による直接気管挿管の導管として使用できます。

AuraGain小児用は、小児患者の体重により、1~2.5までの、4サイズを展開しています。

サイズ1と1.5には、オリジナルのエアウェイコネクタが搭載され、デッドスペースを削減します。

- MR適合
- フタル酸エステルフリー



Ambu® AuraOnce™

AuraOnceは、日常的に使用できるラリゲルマスクです。

自然な解剖学的構造を丁寧に再現したカーブにより、自然な仰臥位のままで、上顎に余分なストレスがかからず使用できます。

エアウェイチューブはD型で、挿入時、人間工学に基づいたしっかりとしたグリップが確保されます。カフ圧を低く抑え、迅速に固定することができます。


- MR適合
- フタル酸エステルフリー



Ambu® Aura-i™

Aura-i は、気管チューブが不要とされる場合の気道確保用に、日常使用するためにデザインされたラリングルマスクです。気道解剖学的構造に合わせて事前に成形したカーブにより、迅速な留置が可能となります。カートに常備することもできます。Aura-iは、軟性気管支鏡(Ambu® aScope™ 4 ブロンコなど)による直接気管挿管の導管として使用できます。

- MR適合
- フタル酸エステルフリー

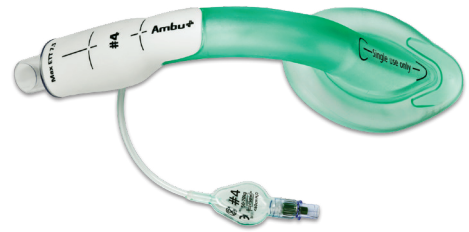

Ambu® AuraFlex™

AuraFlexは、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、その他の頭頸部手術用にデザインされたフレキシブルラリングルマスクです。エアウェイチューブはワイヤ補強されているため閉塞のリスクが低減でき、また、長く柔軟性があるため、シール性を保ちながら術野から離れた位置に固定することが可能です。インフレーションラインが一体化されているため、手術中に切断されるリスクが軽減されます。

- フタル酸エステルフリー



Ambu® AuraStraight™

AuraStraightは、麻酔と救急医療の両方で使用するためにデザインされたラリングルマスクです。ユニークな一体成形のストレートなデザインが特徴です。カフは柔らかく薄いいため、気道の形状に対して最小限の圧力でシール性の確保が期待できます。

- MR適合
- フタル酸エステルフリー



注文情報および製品仕様

カタログ番号	サイズ	患者体重目安 (kg)	最大空気注入量 (ml)	挿入可能気管チューブ最大径 (mm)	胃管チューブ最大径 (Fr)
--------	-----	-------------	--------------	--------------------	----------------

Ambu® AuraGain™ 最大カフ内圧は 60cm H₂O

408100000	1	2 - 5	4	3.5	6
408150000	1.5	5 - 10	7	4.0	8
408200000	2	10 - 20	10	5.0	10
408250000	2.5	20 - 30	14	5.5	10
408300000	3	30 - 50	20	6.5	16
408400000	4	50 - 70	30	7.5	16
408500000	5	70 - 100	40	8.0	16

Ambu® AuraOnce™ 最大カフ内圧は 60cm H₂O

321100000	1	2 - 5	4	-	-
321150000	1.5	5 - 10	7	-	-
321200000	2	10 - 20	10	-	-
321250000	2.5	20 - 30	14	-	-
321300000	3	30 - 50	20	-	-
321400000	4	50 - 70	30	-	-
321500000	5	70 - 100	40	-	-

Ambu® Aura-i™ 最大カフ内圧は 60cm H₂O

329100000	1	2 - 5	4	3.5	-
329150000	1.5	5 - 10	7	4.0	-
329200000	2	10 - 20	10	5.0	-
329250000	2.5	20 - 30	14	5.5	-
329300000	3	30 - 50	20	6.5	-
329400000	4	50 - 70	30	7.5	-
329500000	5	70 - 100	40	8.0	-

Ambu® AuraFlex™ 最大カフ内圧は 60cm H₂O

327200000	2	10 - 20	10	-	-
327250000	2.5	20 - 30	14	-	-
327300000	3	30 - 50	20	-	-
327400000	4	50 - 70	30	-	-
327500000	5	70 - 100	40	-	-

Ambu® AuraStraight™ 最大カフ内圧は 60cm H₂O

324100000	1	2 - 5	4	-	-
324150000	1.5	5 - 10	7	-	-
324200000	2	10 - 20	10	-	-
324250000	2.5	20 - 30	14	-	-
324300000	3	30 - 50	20	-	-
324400000	4	50 - 70	30	-	-
324500000	5	70 - 100	40	-	-

販売名: Ambu ラリンゲルマスク 認証番号: 301AFBZI00010000



当社の環境的観点についての詳細はコチラをご確認ください。
go to <https://www.ambu.com/about/sustainability>

Ambu ラリンゲルマスク

【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

製造元: Ambu A/S (デンマーク)

Ambu

【製品に関するお問い合わせ先】

アンブ株式会社

電話番号: 03-6222-8723 (代)

www.ambu.co.jp