



Ambu® aScope™ 4 シスト

シングルユース軟性膀胱鏡で

質と効率の向上を実現

# aScope™ 4 シストは、 滅菌済みのシングルユース内視鏡です。 新品の状態です、いつでも、どこでも使用できます。

aScope 4 シストなら毎回新品の滅菌済み膀胱鏡を使うことができ、交差感染のリスクを低減します。再処理や修理を待つ時間が不要な為、必要な時に直ぐに使用でき、検査や処置が遅れる心配もありません。

処置によって高価な膀胱鏡を損傷するのではないかと心配する必要もなく、経年劣化による画質や屈曲性の低下もありません。毎回新品の状態です、明瞭かつ鮮明な画像、スムーズな操作性を提供します。

210°/120°という高い屈曲角度と、異なる柔軟性を組み合わせた挿入コードにより、尿道や膀胱内をスムーズに操作、操縦できます。

生検鉗子の有無にかかわらず、膀胱内で先端を完全に後屈させて膀胱頸部を観察することが可能です。

aScope 4 シストは持ち運びができ、ER、ICUなど院内どこからのコンサルティング依頼にも対応が容易です。



## 簡単な作業手順と軽量な軟性膀胱鏡ソリューション

aScope 4 シストの重さはわずか158gで、互換性のあるイービュー 2 アドバンス V2 モニタはわずか2.7 kgです。

イービュー 2 アドバンス V2 モニタは、患者さんの傍の見やすい位置に簡単に設置でき、画像や動画を撮影して保存し、検査後に、結果を患者さんと一緒に確認することも容易です。

# aScope™ 4 シストなら、 再処理や修理にかかる時間も コストも不要です。

aScope 4 シストを使用することで、リユーズブル膀胱鏡の再処理にかかる手間と時間、洗浄消毒用品、メンテナンス、修理などのコストが削減できます。ワークフローが改善されることで、院内全体のコストの削減、リソースの再配分ができる可能性があります。

## リソースの使い方を 変えましょう。

看護師やスタッフは、使用後の膀胱鏡洗浄の際の再処理作業や消毒剤への暴露から解放されます。看護師やスタッフは、それによって空いた時間で、より多くの検査補助に時間を当てることができます。



### シングルユース内視鏡メーカーとしての 卓越性

Ambu社は、2009年に世界で初めてのシングルユース軟性気管支鏡 Ambu® aScope™を発売しました。当社のシングルユース内視鏡は現在3,500以上の施設で、100万本以上使用されています。

aScope 4 シストは、この10年にわたる経験とノウハウをもとに開発されました。


## 注文情報

製品名	カタログ番号	入数/箱
Ambu® aScope® 4 シスト リバース	600001000	5 本/箱
販売名: Ambu aScope シスト 認証番号: 302AFBZI00095000		
Ambu® エービュー 2 アドバンス V2	405011000JPN2	1 台/箱
販売名: Ambu エービュー 2 アドバンス 届出番号: 13B1X10004000081		

## 製品仕様

光学系	
視野方向	0° (直視)
視野角	120°
被写界深度	3 - 100 mm
挿入部	
屈曲角度*	210° up, 120° down
挿入コード直径	16.2 Fr / 5.4 mm
先端部直径	16.2 Fr / 5.4 mm
挿入部最大径	18 Fr / 6.0 mm
有効長	390 mm
ワーキングチャンネル	
チャンネル挿入口最小径**	6.6 Fr / 2.2 mm

\* 挿入コードを真っ直ぐにしない場合や内視鏡付属品を挿入した場合は、屈曲角度に影響が出る場合がありますのでご注意ください。  
\*\* この最小径のアクセサリが、組み合わせとして、必ずしも互換性があるというわけではありません。

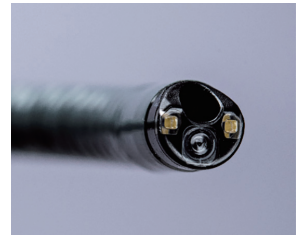

拡大した先端部

### 製品紹介動画



#### Ambu aScope シスト

【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社  
製造元：Ambu A/S (デンマーク)

#### Ambu エービュー 2 アドバンス V2

【製造販売業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社  
製造元：Ambu A/S (デンマーク)

# Ambu

【製品に関するお問い合わせ先】

アンブ株式会社

電話番号: 03-6222-8723 (代)

www.ambu.co.jp